


Medisana kućna digitalna vaga ISB

Delovi:

1. Dugme za podešavanje jedinice merenja (sa donje strane vage)
2. Odeljak za baterije (sa donje strane vage)
3. Displej

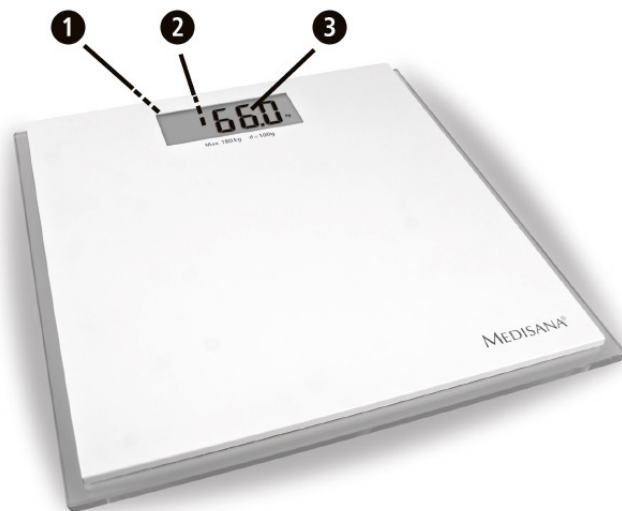

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, a pogotovo deo sa sigurnosnim uputstvima i čuvajte uputstvo za upotrebu. Ukoliko nekome poklonite ovaj proizvod, obavezno mu dajte i uputstvo.

Simboli



Ovo uputstvo za upotrebu je za kućnu vagu ISB. Ovo uputstvo sadrži važne informacije o korišćenju.



Pažljivo pročitajte uputstvo, da ne bi došlo do povrede ili štete na uređaju.



UPOZORENJE Ovaj simbol upozorava na mogućnost povrede korisnika ukoliko se ne pridržavate uputstva.



OPREZ Ovaj simbol upozorava na mogućnost nastanka štete na uređaju.



OBAVEŠTENJE Ovaj simbol označava dodatne korisne informacije vezane za upotrebu.



Broj lota  Oznaka proizvođača



Sigurnosna uputstva

Bilo koji oblik terapije ili dijeta za osobe sa premalom ili prevelikom težinom zahteva stručno savetovanje profesionalca (doktor, nutricionista). Vrednosti dobijene merenjem na vagi mogu se koristiti kao korisni dodatak.



Opasnost od prevrtanja! Ne postavljajte vagu na neravnu površinu. Vodite računa da kada stojete na vagu ne stanete na uglove vage.



Nikada nemojte stajati na uglovima/ivicama vage.



Opasnost od klizanja! Nemojte stajati na vagu vlažnim ili mokrim stopalima. Skinite čarape pre nego što stanete na vagu.

- Vagu koristite samo u za to predviđene svrhe koje su opisane u uputstvu za upotrebu.
- Garancija će biti nevažeća ako je vaga korišćena u svrhe za koje nije namenjena.
- Vaga je namenjena za kućnu upotrebu. Nije namenjena za korišćenje u komercijalne svrhe u bolnicama ili medicinskim ustanovama.
- Nemojte koristiti vagu ako radi nepravilno, ukoliko je došlo do pada, ako je upala u vodu ili je oštećena.
- Maksimalna težina za koju je namenjena vaga je 180 kg / 396 lb / 28 st. Nemojte preopterećivati vagu.



Postavite vagu na čvrstu i ravnu površinu. Ako postavite vagu na mekanu i neravnu površinu dobijeni rezultati mogu biti netačni.



Nemojte koristiti vagu u uslovima ekstremno visoke temperature i vlažnosti vazduha. Držite vagu dalje od vode.



Rukujte vagon pažljivo. Vaga ne sme biti izložena udarcima ili vibracijama. Vodite računa da ne ispuštite vagu.



Nemojte pokušavati da rasklopite vagu, u suprotnom će garancija biti poništena. Vaga ne sadrži delove kojima je potrebno održavanje ili zamena od strane korisnika osim baterija.

Ne pokušavajte sami da popravite vagu u slučaju kvara jer će to dovesti do poništavanja garancije. U slučaju bilo kakvog kvara obratite se uvozniku. Ako vagu ne koristite duži vremenski period, izvadite baterije.

Hvala na poverenju!

Kupovinom kućne vage ISB dobili ste proizvod vrhunskog kvaliteta firme MEDISANA. Ova vaga je namenjena za merenje telesne težine. Da biste postigli željene rezultate Vašom MEDISANA ISB vagon duži vremenski period, savetujemo Vam da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i održavanje.

Proverite da li se u pakovanju nalazi: kućna vaga ISB, 3 baterije AA LR6 od 1,5V i uputstvo za upotrebu.

Pakovanje se može ponovo koristiti i može biti reciklirano. Molimo Vas da pakovanje koje ne koristite odložite pravilno. Kontaktirajte prodavca ukoliko uočite neka oštećenja prilikom otvaranja uređaja.

Važno: Ne dozvolite deci da se igraju sa zaštitnom folijom jer može doći do gušenja!

Karakteristike

- Ultratanak dizajn, visina vage 21,5 mm
- Visokokvalitetno sigurnosno staklo debljine 8mm
- Visokokvalitetna tehnologija senzora
- Patentiran displej sa plavim led osvetljenjem
- Max. merenje do 180 kg / 396 lb / 28 st 4lb
- Podeoci po 100 g / 0,2 lb / ¼ lb
- Mogućnost izbora jedinice merenja kg / lb / st
- Direktno merenje telesne težine
- Laka za upotrebu
- Automatsko isključivanje
- Upozorenje za preopterećenost vage
- Upozorenje za prazne baterije
- Uključene 3 baterije od 1,5 V tipa AA, LR6

Preduslovi koji moraju biti ispunjeni da biste dobili tačne i pouzdane rezultate merenja:

- Uvek se merite u istim uslovima
 - Uvek se merite u isto vreme
 - Stanite uspravno i mirno bez pomeranja za vreme merenja
 - Poželjno je da se merite ujutro nakon kupanja ili tuširanja vodeći računa da su Vam stopala suva
- Ukoliko se redovno merite možete dobiti pouzdane informacije o kretanju Vaše telesne težine.

Postavljanje / zamena baterija

Tri baterije tipa AA, LR6 od 1,5V se nalaze u pakovanju. Pre nego što počnete sa upotrebom vage morate ubaciti baterije u odeljak koji se nalazi sa donje strane vage (2). Vodite računa o polaritetu baterije (kako je prikazano u odeljku za baterije). Zatvorite poklopac.

Bateriju zamenite ako se na displeju (3) pokaže znak „Lo“ ili ako se na displeju ne pokaže ništa kada uključite vagu.

Sigurnosne napomene vezane za baterije

Nemojte rastavljati baterije. Prazne baterije odmah izvadite iz vage. U slučaju da baterije iscure, vodite računa da kiselina ne dođe u kontakt sa kožom, očima ili membranom sluzokože nosa ili očiju. Ako kiselina ipak dospe u kontakt sa ovim delovima tela detaljno isperite sa puno tekuće vode i obratite se lekaru. Ako progutate bateriju, odmah se obratite lekaru. Prilikom zamene baterija uvek zamenite sve baterije istovremeno. Uvek koristite baterije iste vrste i nikad ne koristite jednu korišćenu i jednu novu bateriju. Vodite računa o polaritetu prilikom postavljanja baterija. Ukoliko ne planirate da koristite vagu duže vreme izvadite baterije. Čuvati van domašaja dece. Ne puniti baterije jer mogu da eksplodiraju. Ne praviti kratki spoj jer može doći do eksplozije. Ne bacati u vatru jer može doći do eksplozije. Ne bacati istrošene baterije zajedno sa smećem iz domaćinstva. Bacite ih na posebno predviđena mesta ili ih predajte ovlašćenom prodavcu.

Merenje / step on funkcija i promena jedinice merenja

1. Postavite vagu na čvrstu ravnu površinu. Ukoliko ste pomerali vagu neposredno pre merenja neophodno je da je ponovo uključite i podesite mernu jedinicu tako što ćete lagano doći mernu platformu, na displeju će se potom prikazati „0,0 kg“. Možete postaviti različite jedinice merenja: kilogrami (kg), stone (st) ili funte (lb) tako što ćete pritisnuti dugme za podešavanje jedinice merenja. Kada se vaga ugasi spremna je za step on funkciju. Ovu proceduru morate da ponovite svaki put kada pomerite vagu.
2. Stanite na vagu mirno. Uređaj će se automatski uljučiti, a na displeju i staklenom ramu će se upaliti plavo svetlo. Displej (3) će prikazati „0,0 kg“. Možete ponovo izabrati jedinicu merenja (kilogrami (kg), stone (st) ili funte (lb)) tako što ćete pritisnuti dugme za podešavanje jedinice merenja (1).
3. Kada je merenje završeno, Vaš rezultat će biti prikazan na displeju, zatrepriće par puta, a potom će se umiriti.
4. Vaga će se automatski isključiti kada siđete sa merne površine nakon približno 6 sekundi.

Moguće greške i rešenja

Na displeju se mogu pojaviti sledeće poruke o greškama:

Err

Vaga je preopterećena.

Lo

Baterije su se ispraznile i treba ih zameniti.

Čišćenje i održavanje

Pre čišćenja obavezno izvadite baterije. Nemojte koristiti jak deterdžent ili čvrste četke za čišćenje. Koristite mekanu malo navlaženu krpu. Nikada ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili alkohol. Vodite računa da voda ne uđe u uređaj. Nakon čišćenja možete ponovo koristiti vagu tek kada je potpuno suva. Ako vagu ne planirate da koristite duže vreme izvadite baterije u suprotnom rizikujete da dođe do curenja baterija. Nemojte izlagati vagu direktnom sunčevom svetlu, zaštitite je od prljavštine i vlage. Nemojte vagu čuvati u uspravnom položaju jer to može dovesti do curenja baterija.

Deponovanje



Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje (bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance) bacati na za to predviđenim mestima. Molimo da izvadite baterije pre nego što bacite vagu.

Baterije nemojte bacati sa smećem iz domaćinstva već na za to predviđenim mestima. Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog dilera radi dobijanja informacija o odlaganju

Specifikacija

Model	Medisana digitalna kućna vaga ISB
Napajanje	4,5 V = 3 baterije od 1,5 V tipa AA / LR6
Raspon merenja	Do max 180 kg / 396 lb / 28 st 4lb
Podeoci	Po 100 g / 0,2 lb / ¼ lb
Automatsko isključivanje	Nakon približno 6 sekundi
Dimenzije (D x Š x V)	Približno 31,9 x 31,9 x 2,15 cm
Težina	Približno 2,6 kg
Artikal broj	40485
Ean broj	40 15588 40485 6

CE Zadržavamo pravo da promenimo tehničke i dizajnerske karakteristike, kao deo našeg konstantnog procesa unapređenja proizvoda.

Garancija i uslovi popravke

U slučaju da imate reklamaciju obratite se uvozniku. Ako je neophodno da aparat pošaljete navedite šta nije u redu sa aparatom i priložite kopiju računa i garnatnog lista.

Garancija pokriva sledeće:

1. MEDISANA daje garanciju od tri godine od datuma kupovine za sve svoje proizvode. U slučaju reklamacije datum kupovine mora biti potvrđen datumom na računu.
2. Nedostaci uzrokovani proizvodnom greškom ili greškom u materijalu će biti besplatno popravljani u garantnom roku.
3. Garantni rok se ne produžava nakon izvršene reklamacije. Ovo se odnosi i na aparat i na rezervne delove.

Ova garancija ne pokriva:

- a) Sve kvarove uzrokovane nestručnim rukovanjem (npr. ukoliko niste pažljivo pročitali uputstvo).
 - b) Sve prepravke ili pokušaje popravke od strane neovlašćenih lica.
 - c) Oštećenja nastala u toku transporta do kupca.
 - d) Normalno trošenje i cepanje opreme ili dodatka
- MEDISANA nije odgovorna za direktan ili indirektan gubitak ili štetu koju bi korišćenje ovog proizvoda moglo da izazove, čak i kada kvar podleže garanciji.

Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:

VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533, e-mail: vanabgd@sezampro.rs, www.vana.co.rs