


OPREZ

- Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.
- Uputstvo za upotrebu je deo proizvoda i sadrži važne informacije o korišćenju vage.
- Čuvajte uputstvo za upotrebu.
- Ukoliko neke poklonite ovaj proizvod, obavezno mu dajte i uputstvo.

	CE znak		Čuvajte u suvim uslovima
	GOST-R Sertifikat		Simbol zelene tačke
	Rohs certifikat za komponente		Simbol za reciklažu
	WEEE direktiva za uređaj		WEEE direktiva za baterije
	Upozorenje		Proizvođač
	Pratite uputstvo za upotrebu		EC Predstavnik
	Broj lota		

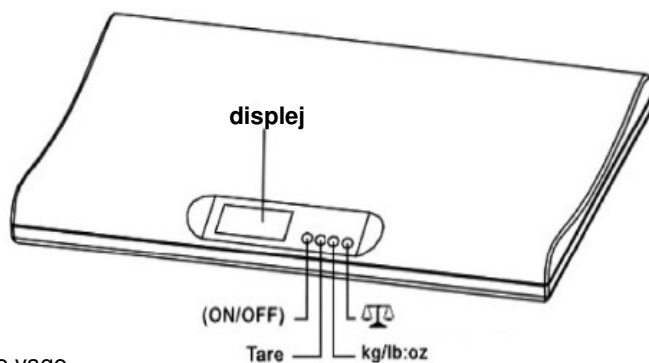

Opis

Displej: prikazuje težinu bebe i druge informacije

Dugme ON/OFF za uključivanje / isključivanje

TARE dugme: omogućava da se oduzme inicijalna tare težina

Kg / Lb:oz: omogućava da promenite jedinicu merenja


≠ dugme: omogućava funkciju poređenja koja je opisana u uputstvu

Postavljanje baterija

• Okrenite vagu i skinite poklopac za baterije koji se nalazi sa donje strane vage.

• Ubacite 2 standardne AA baterije vodeći računa o polaritetu kao što je prikazano u odeljku za baterije • Zatvorite poklopac za baterije i postavite vagu na ravnu i čvrstu površinu da biste izmerili Vašu bebu. Tepih ili mekane podloge nisu pogodne za merenje. • Pre nego što stavite bebu na vagu vodite računa da površina vage bude potpuno suva i da nije klizava.

Normalna funkcija merenja

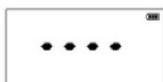


Pritisnite dugme da biste uključili vagu. Četiri crtice i ikona za bateriju će biti prikazane, a zatim će preći u sledeći prikaz na displeju



„0.000 kg“ i simbol baterije će biti prikazani na displeju.




Stavite bebu na vagu. Težina je izmerena kada se na displeju pojavi „Hold“.
Napomena: S obzirom da se beba stalno pomera, težina na displeju se menja za vreme procesa merenja. Potrebno je 15 sekundi da vaga pravilno izmeri težinu bebe koja se pomera. Izmerena težina će biti prikazana na displeju 10 sekundi, a zatim se vaga automatski isključuje.

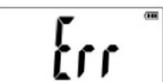

„Err“ će se pojaviti na displeju ako je vaga preopterećena.

Funkcija TARE

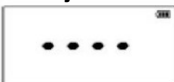

Ova funkcija omogućava da isključite težinu bilo kog materijala ili čebeta / prekrivača koje ste stavili na vagu ako bebu merite голу / bez odeće.

Pritisnite dugme da biste uključili vagu. Četiri crtice i ikona za bateriju će biti prikazane, a zatim će preći u sledeći prikaz na displeju.



„0.000 kg“ i simbol baterije će biti prikazani na displeju.

„0:0 lb:oz“ i simbol baterije će biti prikazani na displeju ukoliko je izabrana ova jedinica merenja.



Stavite čebe na vagu. Težina čebeta će biti prikazana.



Kada se „Hold“ pojavi na displeju odmah pritisnite dugme TARE



„0.000 kg“ (0:0 lb:oz ukoliko je izabrana ova jedinica merenja), TARE i simbol baterije će biti prikazani na displeju.




Napomena: Ostavite čebe na vagi. Ako sklonite čebe sa vage, na displeju će se pojaviti negativna vrednost.

Stavite golu / bez odeće bebu na čebe. Neto težina gole / bez odeće bebe će biti prikazana kada se „Hold“ pojavi. Vaga će se automatski isključiti nakon 10 sekundi.



FUNKCIJA IZBORA JEDINICE MERENJA


- Pritisnite dugme  da biste uključili vagu.
- Pre nego što stavite bebu na vagu, pritisnite dugme Kg / lb:oz da biste izabrali jedinicu merenja.
- Izabrana jedinica merenja će biti prikazana sve dok se vaga ne uključi sledeći put


FUNKCIJA POREĐENJA

Ova funkcija omogućava da izmerite količinu mleka ili hrane koju ste dali bebi za vreme obroka.

Pre hranjenja bebe, izmerite bebu koristeći normalnu funkciju merenja. Težina bebe pre hranjenja je snimljena, kada se pojavi „Hold“.

Sklonite bebu sa vage i nahranite je

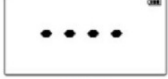

Nakon hranjenja bebe pritisnite dugme  jednom da biste uključili vagu. Četiri crtice i ikona za bateriju će biti prikazane, a zatim će preći u sledeći prikaz na displeju




Biće prikazana težina bebe pre hranjenja.
Napomena: Ova vrednost je u minusu.



Stavite bebu nahranjenu mlekom na vagu, na displeju će biti prikazana težina mleka kojom ste nahranili bebu.


PRIMER

Ako je težina bebe pre hranjenja 8.0 kg, tih 8.0 kg će biti snimljeno nakon merenja bebe koristeći normalnu funkciju merenja. „-8.000 kg“ (minus 8.0 kg) će biti prikazano kada pritisnete dugme . Zatim stavite bebu nahranjenu mlekom na vagu. Na displeju će biti prikazana težina mleka kojom ste nahranili bebu. Ako ste nahranili bebu sa 320 gr mleka (težina), „0.320 kg“ će biti prikazano.

Ukupna težina bebe nahranjene mlekom je 8.000 kg + 0.320 kg = 8.320 kg
Vaga će se automatski isključiti nakon 10 sekundi.



Upozorenja i opšta sigurnosna uputstva

- Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja vage. Ono sadrži važne informacije koje se tiču korišćenja i sigurnosnih uputstava.
- Svako nepravilno korišćenje i nepravilna upotreba mogu oštetiti uređaj i dovesti korisnika u opasnost.
- Nikada ne ostavljajte bebu bez nadzora za vreme merenja.
- Vagu koristite samo za merenje beba koje imaju manje kilograma od maksimalnog kapaciteta vage.
- Preopterećenje može dovesti do štete i opasnosti.
- Za čišćenje koristite samo vlažnu krpnu. Nemojte uranjati vagu u vodu ili je ispirati pod mlazom tekuće vode.
- Nemojte koristiti deterđent ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Kada koristite vagu, držite je dalje od izvora elektromagnetnih talasa kao što su mikrotalasna pećnica, mobilni telefoni i bežične mreže.
- Nemojte izazivati kratak spoj na baterijama.
- Nikada nemojte sami popravljati vagu da biste izbegli opasnosti vezane za struju.
- Nemojte davati deci da se igraju sa pakovanjem, naročito plastičnim kesama. Plastične kese mogu dovesti do gušenja.
- U slučaju elektrostatičkog kvara, ponovo postavite baterije kako biste se vratili na normalno funkcionisanje.
- Ako je na displeju prikazana greška „Err“, isključite vagu. Ponovo uključite i pratite uputstvo.
- Nikada nemojte ostavljati objekte na vagi kada nije u upotrebi.
- Nemojte koristiti vagu konstantno opterećenu jer to može oštetiti mehanizam za merenje.
- Snimljene izmerene vrednosti će se izbrisati kada stavite nove baterije.
- Vaga će se automatski isključiti nakon 1 minuta od uključivanja ako se ne koristi. Da biste odmah isključili vagu, pritisnite dugme  i držite pritisnuto oko pola sekunde.
- Izbegavajte naglo pomeranje vage ili vodite računa da Vam vaga ne padne.
- Vaga je namenjena za ličnu upotrebu za merenje težine beba. Nije dozvoljeno koristiti vagu u medicinske svrhe ili druge svrhe osim navedene.




DEPONOVANJE



Na kraju korišćenja nemojte bacati vagu, uključujući i delove i dodatni pribor, zajedno sa smećem iz domaćinstva, već u skladu sa direktivom 2002/96 EC. S obzirom da se mora tretirati odvojeno od kućnog otpada, morate je odneti na za to predviđeno mesto za odlaganje električne i elektronske opreme. Kazna u slučaju prestupa je stroga. Baterije koje se koriste u uređaju moraju da se odlože u specijalnim kantama kada se istroše.

Tehnička specifikacija

Dimenzije	540 x 345 x 57 mm
Displej	Pozadinsko LCD svetlo
Dimenzije displeja	69 x 32,5 mm
Težina	1,78 kg
Snaga	2 x AA baterije
Indikator baterije	Ikona za baterije  treperi ako su se baterije ispraznile
Merna jedinica	kg – lbs
Minimalna težina	2 kg
Raspon merenja	Od 0,02 kg do 18 kg / od 1 do 40 lbs
Uslovi korišćenja	od 10°C ~ 40°C
Uslovi skladištenja	od -10°C ~ 55°C

Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:

VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533, e-mail: office@vana.co.rs www.vana.co.rs